


## ➤ Die Bedienelemente

- 1 Display
- 2 **MODE/MEM**-Taste
- 3 **⏻**-Taste
- 4 **LIGHT/SET**-Taste
- 5 **SCAN**-Taste
- 6 Fieberindikator
- 7 Messsensor
- 8 Batteriefachdeckel

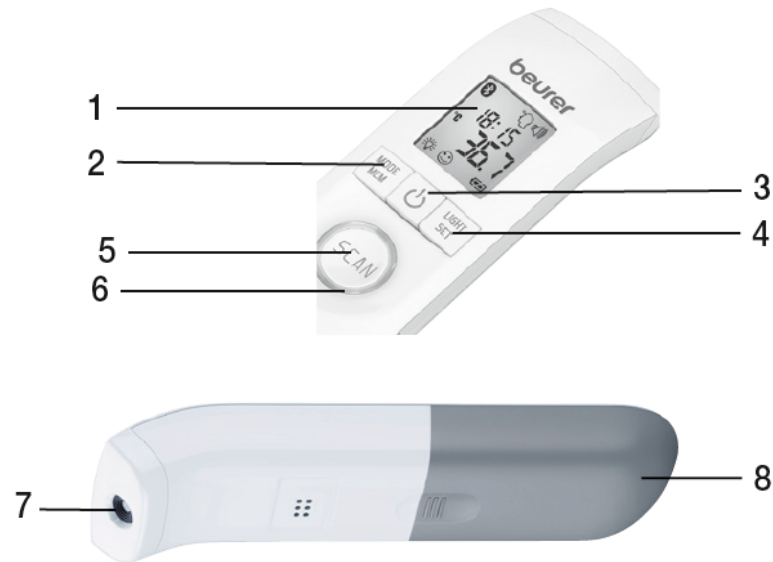

Tasten	Funktionen
<b>MODE/MEM</b>	<b>MODE</b> Einstellung des Messmodus. <b>MEM</b> Anzeige der gespeicherten Messwerte.
<b>LIGHT/SET</b>	<b>LIGHT</b> Manuelles Zuschalten der Displaybeleuchtung. <b>SET</b> Einstellung der Grundfunktionen.
<b>⏻</b>	Gerät ein-/ausschalten.
<b>SCAN</b>	Temperaturmessung starten.

# TELEARZT

## ➤ So stellen Sie die Uhrzeit um:

# TELEARZT

### Temperaturmesseinheit

Legen Sie die Batterien neu ein oder halten Sie die **LIGHT/SET**-Taste beim eingeschalteten Thermometer 3 Sekunden gedrückt. Im Display blinkt die Temperaturmesseinheit (Abb. 1).

Sie können sich Ihre Messergebnisse in der Temperatureinheit Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) anzeigen lassen.

- Um die Messergebnisse in Celsius anzuzeigen, wählen Sie mit der **MODE/MEM**-Taste °C und bestätigen Sie mit der **LIGHT/SET**-Taste.
- Um die Messergebnisse in Fahrenheit anzuzeigen, wählen Sie mit der **MODE/MEM**-Taste °F und bestätigen Sie mit der **LIGHT/SET**-Taste.

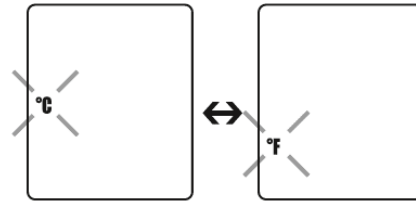


Abb. 1

### Zeitformat

Im Display blinkt die Zeitformat-Anzeige (Abb. 2).

- Stellen Sie mit der **MODE/MEM**-Taste Ihr gewünschtes Zeitformat ein und bestätigen Sie mit der **LIGHT/SET**-Taste.

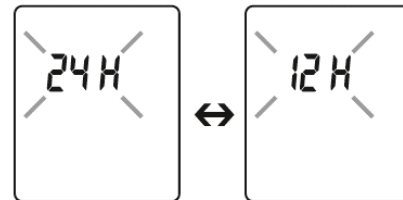


Abb. 2

## ➤ So stellen Sie die Uhrzeit um:

# TELEARZT

Datum

Im Display blinkt die Jahreszahl (Abb. 3).

- Stellen Sie mit der **MODE/MEM**-Taste das Jahr ein und bestätigen Sie mit der **LIGHT/SET**-Taste.

Im Display blinkt Tag/Monat (Abb. 4).

- Stellen Sie mit der **MODE/MEM**-Taste den Tag und den Monat ein und bestätigen Sie mit der **LIGHT/SET**-Taste (Abb. 5).

**i** Wenn als Stundenformat 12 h eingestellt ist, ist die Reihenfolge der Tages- und Monatsanzeige vertauscht. Sie sollten Datum und Uhrzeit korrekt einstellen. Nur so können Sie Ihre Messwerte korrekt mit Datum und Uhrzeit speichern und später abrufen.

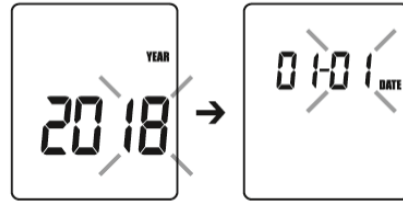


Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5

Uhrzeit

Im Display blinkt die Stunde (Abb. 6).

- Stellen Sie mit der **MODE/MEM**-Taste die Stunde ein und bestätigen Sie mit der **LIGHT/SET**-Taste.

Im Display blinkt die Minute (Abb. 7).

- Stellen Sie mit der **MODE/MEM**-Taste die Minute ein und bestätigen Sie mit der **LIGHT/SET**-Taste.

**i** Im 12-h-Zeitformat wird die Uhrzeit mit AM/PM angezeigt.

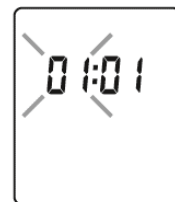


Abb. 6

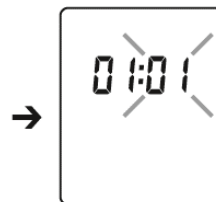


Abb. 7

Bestätigen die weiteren Schritte (Displaybeleuchtung, Signalton, Bluetooth) jeweils mit der **LIGHT/SET**-Taste

Im Display erscheint „OFF“ und das Gerät schaltet sich automatisch aus.

**i** Behalten Sie bitte die automatische Bluetooth Datenübertragung bei, um die Funktionsfähigkeit des TELEARZTes zu gewährleisten.